



**ResMed**

HumidAir™



Kullanım Klavuzu




Türkçe

## Başlangıç

HumidAir™, ısıtılmış nemlendirme sağlayan ve AirSense™ 10 veya AirCurve™ 10 cihazınızla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış bir nemlendiricidir.

Bu kılavuzu, AirSense 10 veya AirCurve 10 cihazınızın kullanıcı kılavuzuyla birlikte okuyun.

## Kurulum

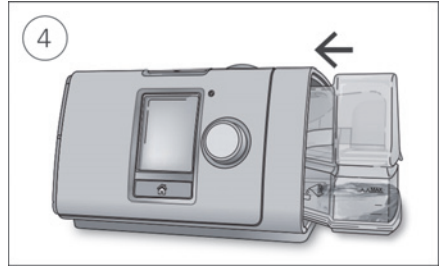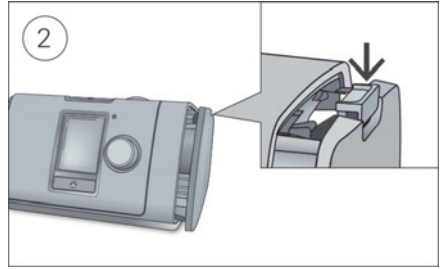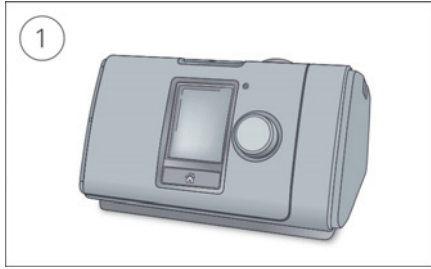

## ⚠ DİKKAT

Nemlendiriciyi aşırı miktarda doldurmayın, çünkü su cihaza ve hortuma girebilir.

1. Place the device on a stable level surface.
2. Yan kapağın klipsine bastırarak çekerek cihazdan yan kapağı çıkarın cihazdan uzakta tutun.
3. Nemlendiriciyi açın ve maksimum su seviyesi işaretine kadar suyla doldurun. Nemlendiriciyi sıcak su ile doldurmayın.
4. Nemlendiriciyi kapatın ve cihazın yanına yerleştirin.  
Cihazınız şimdi nemlendirme ile kullanılmaya hazırdır. Ayarlarınızı değiştirmek için Nem Seviyesine bakın.

Cihazınızın kurulumuyla ilgili daha fazla bilgi için, terapiyi açın veya ayarları değiştirin; cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Önerilen su tipi (sadece Fransa)

Nemlendiricide aşağıdaki su türleri önerilir:

- Haşlanmış musluk suyu, oda sıcaklığına soğutuldu
- Arıtılmış su
- Şişelenmiş su (mineral içeriği düşük).

Not: Evde kullanım için steril olmayan demineralize su kullanmayın.

## Nemlilik Seviyesi

Nemlendirici havayı nemlendirir ve terapiyi daha rahat hale getirmek için tasarlanmıştır. Kuru bir burun veya ağız alıyorsanız, nemi açın. Maskenizde nem varsa, nemi aşağı çevirin.

Nem Seviyesi'ni Kapalı veya 1 ile 8 arasında ayarlayabilirsiniz; burada 1 en düşük nem ayarı ve 8 en yüksek nem ayarıdır.





### Nemlilik Seviyesini Ayarlama:

1. My Options (Seeneklerim) bölümüne girin, kadranı çevirerek Nem Seviyesi'ni vurgulayın ve sonra kadrana basın.
2. Nem seviyesini ayarlamak için kadranı çevirin ve deęişiklikleri kaydetmek için kadrana basın.

Kuru bir burun veya ağız veya maske bulaşmaya devam ederseniz, ClimateLineAir ısıtmalı hortumunu kullanmayı düşünün. ClimateLineAir, İklim Kontrolü ile birlikte daha rahat terapi sunar.

## Nemlendiriciyi Çıkartmak

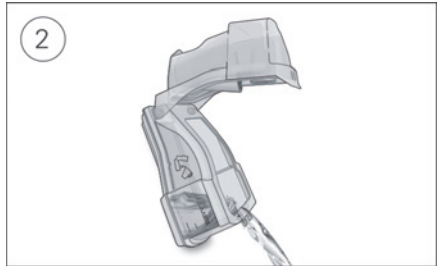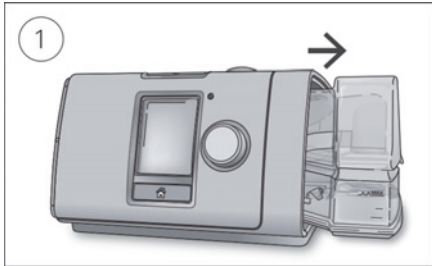

1. Nemlendiriciyi üstte ve altta tutun, hafifçe bastırın ve cihazdan çekin.
2. Nemlendiriciyi açın ve kalan suyu boşaltın.

## Temizleme

Nemlendiriciyi haftada bir açıldığında gibi temizlemelisiniz.

1. Nemlendiriciyi ılımlı bir deterjan kullanarak ılık suda yıkayın.

2. Nemlendiriciyi iyice durulayın ve doğrudan güneş ışığına ve / veya sıcaklığa maruz kalmamasına dikkat edin.

3. Nemlendiriciyi tekrar cihaza takmadan önce nemlendiriciyi açın ve su ile doldurun maksimum su seviyesi işareti kadar.

Not:

- Nemlendiriciyi her gün boşaltın ve temiz, tek kullanımlık bir bezle iyice silin. Doğrudan güneş ışığından ve / veya sıcaktan kurutun.
- Nemlendirici, narın veya cam yıkama devrinde (yalnızca üst raf) bulaşık makinesinde yıkanabilir. 65°C'den yüksek sıcaklıklarda yıkanmamalıdır.

## Kontrol

Nemlendiriciyi düzenli olarak herhangi bir hasar açısından kontrol etmelisiniz.

- Sızıntı yapıyorsa veya kırık, bulanık veya çukur haline geldiğinde değiştirin.
- Conta çatlak veya yırtılmışsa değiştirin.
- Herhangi bir beyaz toz deposunu bir kısım ev sirkesi çözeltisiyle 10 parça suya kadar çalkalayın.

## Seyahat

Nereye giderseniz gidin AirSense 10 cihazınızı yanınızda götürebilirsiniz. Nemlendiriciyi boşalttığınızdan ve seyahat çantasında ayrı olarak ambalajladığınızdan emin olun.

## Uçakla Seyahat

AirSense 10 cihazınız taşınabilir bagaj olarak gemide alınabilir. Tıbbi cihazlar taşıma bagaj limitinize dahil değildir.

Cihazı uçakta kullanırken

- Nemlendiricinin tamamen boş olduğundan ve cihazınıza takıldığından emin olun. Alternatif olarak, yan kapağı tekrar takın.
- Uçak Modu'nu açın.



**ResMed Ltd**

1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australia

**DISTRIBUTED BY**

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
**EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

See [www.resmed.com](http://www.resmed.com) for other ResMed locations worldwide. For patent information, see [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AirSense, AirCurve, HumidAir, ClimateLine and SlimLine are trademarks of ResMed Ltd. AutoSet, SlimLine and ClimateLine are registered in U.S. Patent and Trademark Office. © 2014 ResMed Ltd. 378145/1 2014-07



**ResMed.com**



378145