

ResMed

AirMini™



KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE



ResMed.com/AirMiniApp



TÜRKÇE

ENDİKASYON - KULLANIM AMACI

AirMini otomatik basınç ayarlı olan bu cihaz 30 kg üzeri obstrutif uyku apnesi olan hastalarda kullanılabilir.

KONTRENDİKASYON

Pozitif hava yolu basınç tedavisi bazılarında kontrendike olabilir. Aşağıdaki önceden var olan koşulları olan hastalar:

- şiddetli büllöz akciğer hastalığı
- pnömotoraks
- patolojik olarak düşük kan basıncı
- dehidrasyon
- beyin omurilik sıvısı sızıntısı, yeni kafa cerrahisi veya travma.

YAN ETKİLER

Olağandışı göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı veya artmış reçeteleyen doktorunuza nefes darlığı. Akut üst olunum yolları traktus enfeksiyonu, tedavinin geçici olarak kesilmesini gerektirebilir. Makine ile tedavi sırasındaki aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:


- burun, ağız veya boğazın kuruması
- burun tıkanıklığı
- şişkinlik
- kulak veya sinüs rahatsızlığı
- Göz tahrişi
- Deri döküntüleri.

BİR BAKIŞTA

AirMini sistemi aşağıdakileri içerir:

- AirMini: AirMini makinesi, güç kaynağı ünitesi, koşu poşeti çantası ve aşağıdakilerden biri:
- AirMini kurulum paketi - F20: Hava borusu, F20 konektörü VEYA
- AirMini kurulum paketi - N20: Hava borusu, N20 konnektör, HumidX, HumidX Plus VEYA
- P10 için AirMini maske paketi: Hava hortumu, AirMini maskesi için AirFit P10 (M), P10 yastık (S), P10 yastık (L), HumidX, HumidX Plus, AirFit P10 şapkalı klipsler.

AİRMİNİ CİHAZINIZ

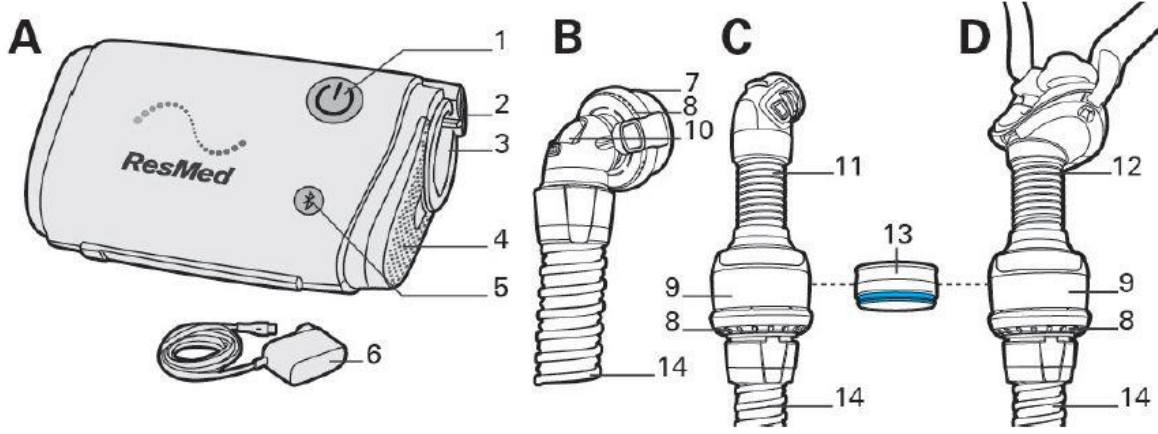

AirMini sistemi, AirMini makinesi ve bir maske paketi veya bir kurulum paketi ile oluşur.

A	AİRMİNİ CİHAZI	6	20W Güç Adaptörü
B	F20 HORTUM BAĞLANTISI	7	F20 Bağlantısı AirMini için
C	N20 HORTUM BAĞLANTISI	8	Vent
D	AİRFİT P10 HORTUM BAĞLANTISI	9	Vent Modülü
1	BAŞLA/DURDUR Tuşu	10	Anti Asfiksi Valf
2	Güç Girişi	11	N20 Bağlantısı AirMini için
3	Hortum Girişi	12	AirFit P10 AirMini için
4	Filtre Kapağı	13	HME ;(Mavi) HumidX, (Gri) HumidX Plus
5	Bluetooth Tuşu	14	AirMini Hortum


Makineniz ResMed'in F20 ve N20 serisi maskeleri ile uyumludur ve AirMini için AirFit P10. Makine ile birlikte kullanılan tüm parçaların ve aksesuarların uyumlu olduğundan emin olun. Uyumluluk bilgileri için daha fazla bilgi için www.resmed.com adresine bakın.

AirMini makineniz ResMed AirMini uygulamasıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, AirMini uygulaması makineyi çalıştırmak için gerekli değildir. AirMini uygulaması hakkında daha fazla bilgi için, makinenizi AirMini uygulamasıyla veya AirMini uygulaması Hasta eHelp ile birlikte kullanma konusuna bakın.

MAKİNEİNİZİ AYARLAYIN


1. Güç kaynağı birimini makineye ve elektrik prizine takın. Konnektör açılı bir kenara sahiptir, böylece güç kablosu makineye yalnızca bir yönde takılabilir.

2. AirMini tüpünün gri ucunu hava çıkışına sıkıca takın. Opsiyonel nemlendirme ekleyin (sadece AirMini için N20 veya AirFit P10 için)

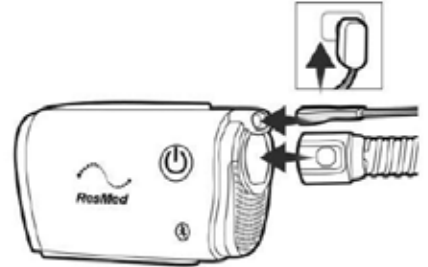

HumidX veya HumidX Plus'ı yerleřtirmek için:

1. Konnektörü yavaşça bükerek açın.
2. Renkli taraf aşağı gelecek şekilde, HumidX / HumidX Plus'ı yanlarından tutun ve takın.
3. Konnektörü hafifçe itin ve yerine kilitlenene kadar bükün.

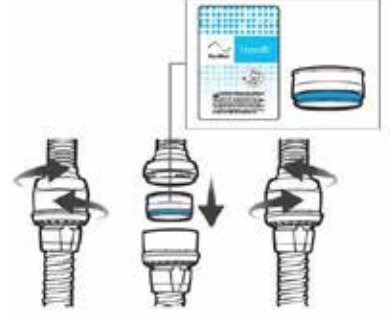


TEDAVİYİ BAŐLAT

1. Bařlat / Durdur düğmesine basarak tedaviye başlayın veya SmartStart™ etkinleřtirildiyse normal nefes alın.

TEDAVİYİ DURDUR

1. Maskenizi çıkarın.
2. Bařlat / Durdur düğmesine basın veya SmartStop Etkinleřtirildiğinde makine durana kadar bekleyin.

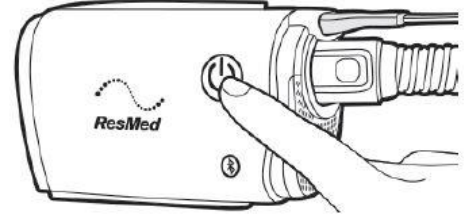



SEYAHAT

Nereye giderseniz gidin AirMini makinenizi yanınızda götürebilirsiniz. Seyahat ettiğiniz bölge için uygun güç kaynağına sahip olduğunuzdan emin olun. Satın alma ile ilgili bilgi için bakım sağlayıcınızla görüşün.

Uçakla seyahat etme

Bazı havayolu řirketleri için tıbbi cihazlar bagaj taşıma limitlerine dahil değildir. Tıbbi cihazlarla ilgili politikaları için havayolunuza danışın. Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration - FAA) gereksinimlerini karşıladığı için, bir uçakta AirMini makinenizi kullanabilirsiniz. Hava yolculuğu ile ilgili uygunluk mektupları www.resmed.com adresinden indirilebilir ve basılır.

Makineyi uçakta kullanırken:

- Güç kaynağına bağlandığında, gösterge ışığı beyaz olana kadar Bluetooth düğmesini  en az on saniye basılı tutarak Bluetooth'u devre dışı bırakın (uçak moduna girin).
- AirMini uygulamasını kullanmayın.
- Tedaviye başlamak için makinenizdeki Bařlat / Durdur  düğmesini kullanın,
- Bluetooth'u tekrar bağlamak için (uçak modundan çıkın) Bluetooth düğmesine basın.

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Saklama / Depolama Koşulları

Saklama Nem Ortamı : %5 - %95'e kadar yoğuşmasız

Saklama / Depolama Ortam Basıncı : 70 – 106 kPa

Saklama / Depolama Sıcaklığı : --20°C ile + 60°C

Not: Aşırı ortam sıcaklığı koşullarında (104 ° F / 40 ° C) hava ve hortumun maskenin yakınındaki kısımları 109 ° F / 43 ° C'ye kadar sıcaklıklara ulaşabilir. Hortumun bu parçaları kullanıcı ile temas halinde değildir ve makine bu aşırı koşullar altında güvende kalır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Birimler, cm H₂O ve hPa olarak ifade edilir. 1 cm H₂O, 0,98 hPa'ya eşittir.

Güç Kaynağı Ünitesi

AC giriş aralığı 100–240V, 50–60Hz, 0.5-0.3A
115V, 400Hz uçak kullanımı için 0.4A

DC Çıkış 24V _____ 0.83A

Tipik güç tüketimi 6.3W

En yüksek güç tüketimi 27W

Terapi sırasında güç kesilirse, güç geri geldiğinde makine tedaviyi otomatik olarak yeniden başlatacaktır.

AirMini gücü

Bekleme modunda güç tüketimi 1 W



ResMed Ltd

MANUFACTURER 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia







See ResMed.com for other ResMed locations worldwide. AirMini, AutoSet, HumidX and SmartStart are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip. "Made for iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone may affect wireless performance. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. IOS is a trademark of Cisco, licensed to Apple Inc. Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. Joy is a trademark of Procter & Gamble. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Galaxy, Edge and Note are trademarks of Samsung. This product uses software developed by the ANTLR project (<http://www.antlr2.org>). © 2018 ResMed Ltd. 388129/1 2018-05

CE
0123

İstanbul Merkez Ofis

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/1 Kat:1 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 545 8080

www.respitek.com.tr

 @respitekvivisol  Respitek Vivisol  Respitek Vivisol
 @RespitekVivisol  @RespitekVivisol  respitekvivisol



RESPİTEK